

Upute za uporabu (priručnik) i tehnički opis

Stalci za infuziju

Pribor za krevete (proizvođača) LINET doo.

Proizvođač:

MARO-Mader, sro
Svolinského 218/1A
779 00 Olomouc
Češka Republika



Verzija: 02
Datum izdavanja: 2021-05

SADRŽAJ

1. Kratice u tekstu.....	
2. Sigurnosne upute, Uvjeti korištenja.....	
3. Simboli i oznake proizvoda.....	
4. Opis postolja za infuziju varijanta A, kataloški broj 250010 za krevet Eleganza 2.....	
5. Opis postolja za infuziju varijanta B, kataloški broj 250008 za krevet Eleganza 3.....	
6. Opis postolja za infuziju varijanta C, kat. br. 270001, s trnom 16 mm za krevet Multicare MC3.....	
7. Opis postolja za infuziju varijanta D, kataloški broj 270006, za krevet Eleganza 3XC.....	
8. Opis postolja za infuziju varijanta E, kataloški broj 270008, za krevet Eleganza 4.....	
9. Opis postolja za infuziju varijanta F, kat. Br. 270009 za krevet Multicare MC3.....	
10. Opis postolja za infuziju varijanta G, kat.br.270016, sklopivi, za krevet Eleganza 5.....	
11. Opis postolja za infuziju varijanta H, kataloški broj 270017, za krevet Sprint.....	
12. Opis postolja za infuziju varijanta K, kataloški broj 270019, za krevet TOM.....	
13. Uvjeti okoliša.....	
14. Čišćenje i dezinfekcija.....	
15. Jamstvo i servis.....	
16. Zaštita okoliša.....	
17. Provjera pravilne instalacije i učestalosti održavanja:.....	
18. Postproduksijske informacije proizvođaču o uporabi proizvoda u kliničkoj praksi.....	

1. Abkratice u tekstu

Is/is = stalak za infuziju, kat.br. = kataloški broj.

 UPOZOREN JE	Pročitajte upute za uporabu! ❖ Prije početka bilo kakve manipulacije potrebno je detaljno pročitati ovaj priručnik. Sve operacije i rad uređaja moraju se izvoditi u skladu s njim. Sve druge radnje izvodite na vlastitu odgovornost i proizvođač ne snosi odgovornost za štetu! Ako poduzmete bilo kakve druge radnje na njemu, činite to na vlastitu odgovornost i proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu. Pažljivo čuvajte upute do zbrinjavanja!
---	---

2. Sigurnosne upute, Uvjeti korištenja

Sigurnosne upute

Ne smije se koristiti ako su pronađeni nedostaci koji mogu oštetiti osobu koja se liječi, osoblje ili treću osobu ili okolni interijer.

Ne smije se preopteretiti, čak ni nakratko.

Prilikom popravka mogu se koristiti samo originalni materijali i komponente. Prilikom zamjene oštećenih dijelova neoriginalnim ili neodgovarajućim materijalima i komponentama, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štetu.

Prije čišćenja ili održavanja kreveta postavljenog na električni krevet, kabel za napajanje uvijek mora biti isključen iz električne mreže.

Nije namijenjen za pranje u perilici.

Mora se sastaviti i postaviti na krevet u skladu s postupkom navedenim u uputama za uporabu.

Nestručno rukovanje uređajem i njegovim dodacima od strane neovlaštenih ili neobučenih osoba može oštetiti uređaj ili njegovu okolinu.

Sve funkcije kreveta mogu se koristiti zajedno s. Rad ovih funkcija mora biti pod isključivom kontrolom zdravstvenog radnika koji je upoznat s uputama za uporabu.

Prilikom postavljanja kreveta, pazite da ne ozlijedite pacijenta ili operatera i da se ne sudarite s krevetom ili njegovim dodacima.

Nemojte koristiti is za transport kreveta.


Ako to ne učinite, može doći do ozljeda pacijenta ili oštećenja kreveta.

Uvjeti korištenja


Namijenjen je za vješanje vrećica (boca) s otopinama za infuziju i kao potporna konstrukcija za ugradnju pumpi za infuziju.

Svaku drugu uporabu potrebno je unaprijed konzultirati s proizvođačem (dobavljačem).


3.Simboli proizvoda i oznake

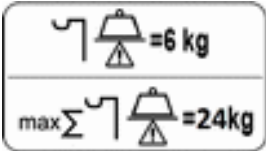	Upozorenje!		Broj modela
	CE oznaka sukladnosti s EU propisima		Serijski broj
	Oznaka za držač infuzije: Nosivost jedne kuke 6 kg Nosivost četiri udice 24 kg		Proizvođač
	Oznaka zabrane ugradnje pumpe za infuziju		Datum proizvodnje
	Medicinski uređaj		

(proizvod) Uzorak etikete

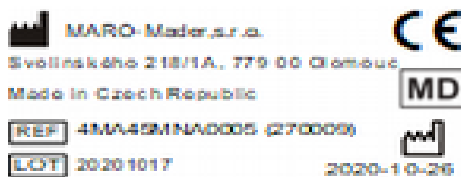

4.Opis postolja za infuziju varijanta A, kataloški broj 250010 za krevet Eleganza 2

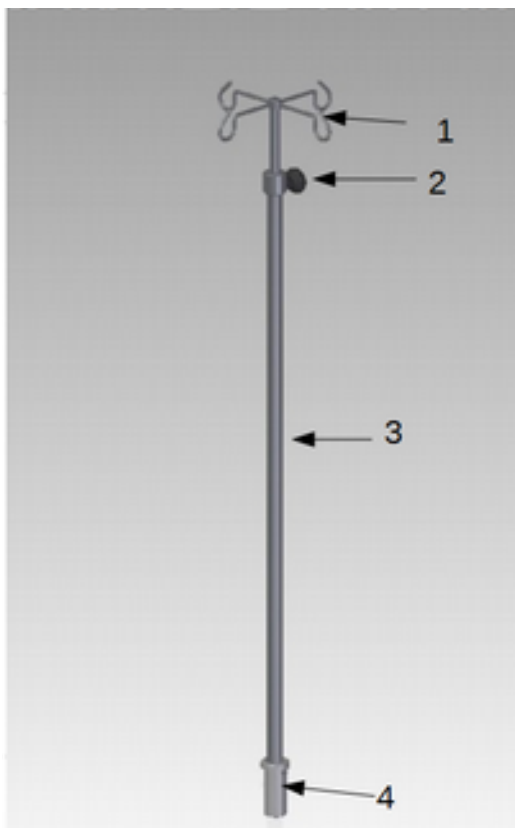


Položaj	Identifikacija dijela	Opis	Broj komada
1	D18-L1000	Štap sa 4 udice	1
2	D35-L34	Glava s vijčanim rozetom za zaključavanje	1
3	D25-L1000	Vanjska cijev	1
4	D34-L85	Plastični trn s bočnom iglom	1

Cizgradnja:

1. Umetnite plastični trn (poz. 4) u kućište u okviru kreveta tako da bočni klin plastičnog trna stane u izrez kućišta u okviru kreveta.
2. Otpustite rozetu vijaka na glavi (poz.2).
3. Pomaknite šipku s 4 kuke (poz. 1) u željeni položaj i zategnite rozetu vijaka.
4. Provjerite je li štap s 4 kuke (poz. 1) čvrsto učvršćen.
5. Ako su svi zahtjevi ispunjeni, možete početi koristiti s.i.

5. Opis postolja za infuziju varijanta B, katalogski broj 250008 za krevet Eleganza 3

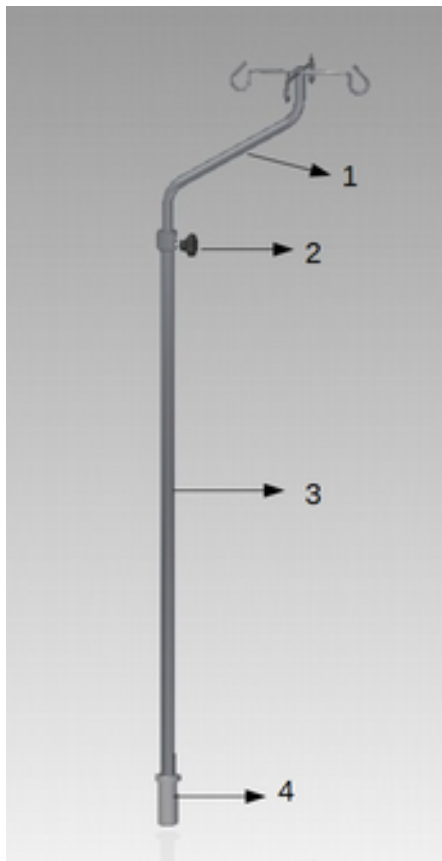

Položaj	Identifikacija dijela	Opis	Broj komada
1	D18-L1200	Štap u obliku slova S s 4 udice	1
2	D35-L34	Glava s vijčanim rozetom za zaključavanje	1
3	D25-L1000	Vanjska cijev	1
4	D34-L85	Plastični trn sa bočnom iglom	1

Cizgradnja:

1. Umetnite plastični trn (poz. 4) u kućište u okviru kreveta tako da bočni klin plastičnog trna stane u izrez kućišta u okviru kreveta.
2. Otpustite rozetu vijaka na glavi (poz.2).
3. Pomaknite šipku s 4 kuke (poz. 1) u željeni položaj i zategnite rozetu vijaka.
4. Provjerite je li štap s 4 kuke (poz. 1) čvrsto učvršćen.
5. Ako su svi zahtjevi ispunjeni, možete početi koristiti s.i.

6.Opis postolja za infuziju varijanta C, kat. br. 270001, s trnom 16 mm za krevet Multicare MC3




Položaj	Identifikacija dijela	Opis	Broj komada
1	D18-L1000	Štap sa 4 udice	1
2	D35-L34	Glava s vijčanim rozetom za zaključavanje	1
3	D25/16-L1000	Vanjska cijev s trnom 16mm	1

Cizgradnja:

1. Umetnite trn promjera 16 mm koji završava vanjsku cijev (dio 3) u kućište u krevetu okvir.
2. Otpustite rozetu vijaka na glavi (poz.2).
3. Pomaknite šipku s 4 kuke (poz. 1) u željeni položaj i zategnite rozetu vijaka.
4. Provjerite je li štap s 4 kuke (poz. 1) čvrsto učvršćen.
5. Ako su svi zahtjevi ispunjeni, možete početi koristiti s.i.

7.Opis postolja za infuziju varijanta D, katalogski broj 270006, za krevet Eleganza 3XC

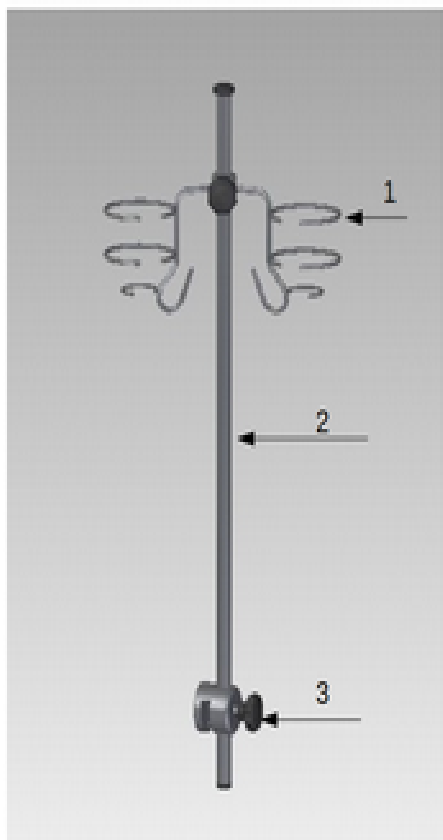

Položaj	Identifikacija dijela	Opis	Broj komada
1	2x košara	Glave za košare	1
2	D18-L800	štap	1
3	D50-L49	Euro-šinska glava	1

Cizgradnja:

1. Otpustite vijčanu rozetu na glavi (dio br. 3) i pričvrstite glavu na Euro-šinu.
2. Postavite visinu šipke za infuziju (dio 2) na željenu vrijednost i zategnite rozetu vijaka (dio 3).
3. Postavite visinu košara'glavu (poz.1.) na željenu vrijednost i zategnite vijakrozeta.
4. Provjerite jesu li šipka (dio 3) i glave za košare (dio 1) čvrsto pričvršćene.
5. Ako su svi zahtjevi zadovoljeni, možete početi koristiti s.i.

8.Opis postolja za infuziju varijanta E, kataloški broj 270008, za krevet Eleganza 4




Položaj	Identifikacija dijela	Opis	Broj komada
1	D18-L1000	Štap sa 4 udice	1
2	D35-L34	Glava s vijčanim rozetom za zaključavanje	1
3	D25/34-110	Vanjska cijev s nosačem 110 mm i trnom 34 mm	1

Cizgradnja:

- 1.Umetnite trn 34 (poz.3) u kućište okvira kreveta tako da donji dio remena nosača stane u izrez kućišta okvira kreveta.
- 2.Otpustite rozetu vijaka na glavi (stavka 2).
- 3.Gurnite šipku s 4 kuke (poz.1) u željeni položaj i zategnite rozetu vijaka.
- 4.Provjerite je li štap s 4 kuke (poz.1) čvrsto učvršćen.
- 5.Ako su svi zahtjevi zadovoljeni, možete početi koristiti s.i.

9.Opis postolja za infuziju varijanta F, kat. Br. 270009 za krevet Multicare MC3

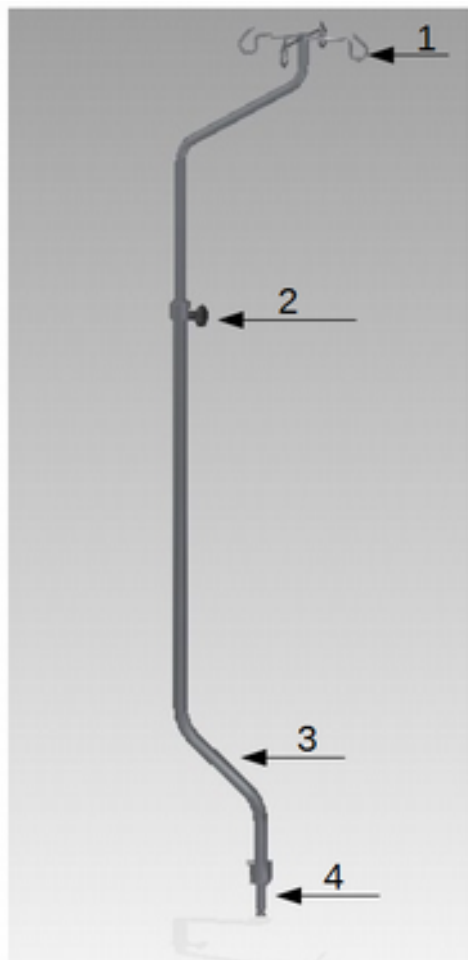


Položaj	Identifikacija dijela	Opis	Broj komada
1	D18-L700	Štap u obliku slova S s 4 udice	1
2	D35-L34	Glava s vijčanim rozetom za zaključavanje	1
3	D25-L1056	Vanjska cijev u obliku slova S s trnom 13 mm	1
4	D40-L85	Adapter za držač infuzije	1

Cizgradnja:

- 1.Umetnite adapter za držač infuzije (poz. 4) u kućište okvira kreveta.
- 2.Izvucite vanjsku cijev (dio 3), okrenite je u željeni položaj i fiksirajte postavljanjem klina cijevi u utor adaptera (dio 4).
- 3.Otpustite vijčanu rozetu glave (dio br. 2), produžite šipku s 4 kuke (1. dio) u željeni položaj i zategnite vijčanu rozetu
- 4.Provjerite je li štap s 4 kuke (poz.1) čvrsto učvršćen.
- 5.Ako su svi zahtjevi zadovoljeni, možete početi koristiti s.i.

10.Opis postolja za infuziju varijanta G, kat. br. 270016, sklopivi, za krevet Eleganza 5

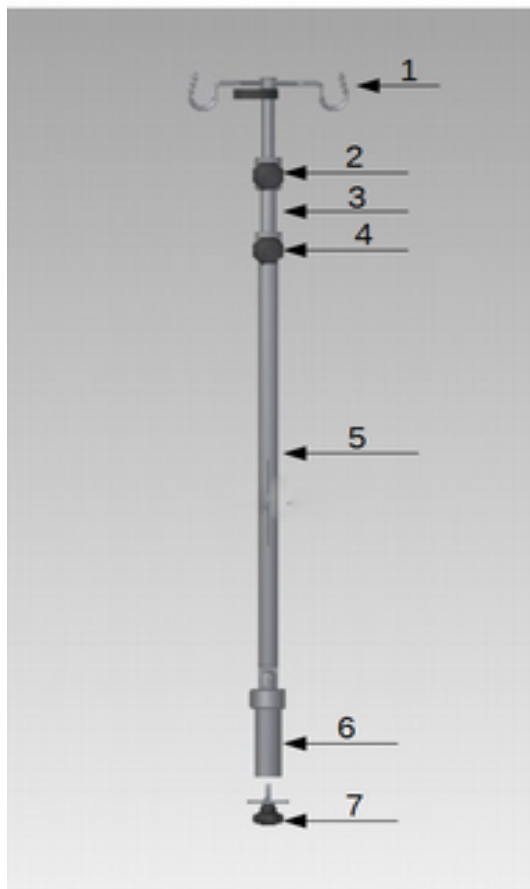

Položaj	Identifikacija dijela	Opis	Broj komada
1	16-600 (prikaz, stručni).	Štap sa 2 udice i kopčom za transport	1
2		Glava 16/20 s rozetom za zaključavanje vijcima	1
3	20-600 (prikaz, stručni).	Srednja cijev	1
4		Glava 20/25 s rozetom za zaključavanje na vijke	1
5	25-600 (prikaz, stručni).	Vanjska cijev	1
6	34-117 (prikaz, ostalo).	Trn s vijčanim rozetnim spojem i podloškom	1
7		Vijčana rozeta s podloškom	1

Cizgradnja:

- 1.Umetnite trn (dijel br. 6) u kućište okvira kreveta i okrenite ga tako da presavijeni stane sa zatvaračem za transport na šinu okvira kreveta.
- 2.Učvrstite trn (dio 6) u kućištu okvira kreveta vijčanom rozetom s podloškom (dio 7).
- 3.Okrenite cijev (dio 5) u okomiti položaj i umetnite je u donji položaj u šupljini trna (dio br. 6).
- 4.Donji položaj fiksirajte vijčanom rozetom na bočnoj strani trna (dio 6).
- 5.Otpustite vijčane rozete na glavama (dio 2 i 4), produžite šipku s 2 kuke u željeni položaj i zategnite vijčane rozete.
- 6.Provjerite je li štap s 2 kuke (poz.1) čvrsto učvršćen.
- 7.Ako su gornji zahtjevi zadovoljeni, možete početi koristiti s.i.
- 8.Namjestite je u presavijeni položaj nakon otpuštanja rozeta s vijcima (dijelovi 2 i 4). Zatim umetnite šipku s kukama (dio 1) i srednju cijev (dio 3) u vanjsku cijev (dio 5).
- 9.Otpustite vijčanu rozetu na bočnoj strani kućišta (dio 6), produžite vanjsku cijev (dio 5) prema gore i preklopite je u transportni položaj tako da transportna kopča naliježe na izrez na okvir kreveta.

11.Opis postolja za infuziju varijanta H, kataloški broj 270017, za krevet Sprint



Infuzijski stalak Sprint sastoji se od šipke dužine 1 m promjera 25 mm, na vrhu s dvije kuke za infuziju na gornjem kraju, trnom na donjem kraju za ugradnju u kućište okvira kreveta Sprint.

PAŽNJA! Zabranjeno je koristiti stalak za infuziju kao ručku za rukovanje za pomicanje kreveta.

12.Opis postolja za infuziju varijanta K, katalogski broj 270019, za krevet TOM



Položaj	Identifikacija dijela	Opis	Broj komada
1	D18-L1000	Štap sa 4 udice	1
2	D35-L34 dural	Glava s vijčanim rozetom za zaključavanje	1
3	D25/34-70	Vanjska cijev s nosačem 70 mm i trnom 34 mm	1

Cizgradnja:

1. ja Umetnite trn 34 (poz. 3) u kućište okvira kreveta tako da donji dio remena nosača stane u izrez kućišta okvira kreveta.
2. Otpustite rozetu vijaka na glavi (stavka 2).
3. Gurnite šipku s 4 kuke (poz.1) u željeni položaj i zategnite vijčanu rozetu.
4. Provjerite je li štap s 4 kuke (poz.1) čvrsto učvršćen.
5. Ako su svi zahtjevi zadovoljeni, možete početi koristiti s.i.

13.Okolišni uvjeti

Uvjeti skladištenja/transporta:

Temperatura: -40 do 70°C / -40 do 160°F Relativna vlažnost: do 90%

Radni/radni uvjeti:

Sobna temperatura: 10 do 40°C/ 50 do 105°F Relativna vlažnost zraka: do 80%.

14.Čišćenje i dezinfekcija

Koristite sredstvo za dezinfekciju (PROPANOL / IZOPROPANOL ili otopina na bazi ALDEHIDA).

Raspršite dezinficijens na površine (plastične ili metalne komponente).

Preporučujemo da obratite posebnu pozornost na nabore, spojeve, vijke.

Kako biste osigurali optimalnu čistoću, preporuča se da očistite spremnik sa svakim novim pacijentom.

15.Jamstvo i servis

Jamstvo je ograničeno samo na zamjenu ili popravak oštećenih dijelova.

Proizvođač jamči jamstvo od 2 godine za nedostatke uzrokovane proizvodnjom (jamstvo vrijedi od datuma kupnje od strane kupca).

Proizvođač i Linet jedine su organizacije koje mogu procijeniti može li se dati jamstvo za neispravan proizvod.

Svaka druga uporaba koja je u suprotnosti s uputama za uporabu smatrat će se kršenjem jamstva.

Jamstvo će također biti poništeno zbog nemara, nedovoljnog nadzora pacijenta, nedovoljnog održavanja, neovlaštene izmjene uređajaili pokušati popraviti is

Jamstvo pokriva samo nedostatke uzrokovane lošom kvalitetom korištenih materijala, proizvodnje i montaže.

Jamstvo ne pokriva nedostatke uzrokovane uporabom proizvoda koja nije navedena u priručniku ili drugom neuobičajenom uporabom.

Jamstveni i izvanjamstveni popravak obavlja proizvođač ili ovlašteni servis na temelju pismene potvrde o osposobljenosti za obavljanje navedenih poslova. Odgovarajući certifikat izdaje proizvođač.

16. Zaštita okoliša

- Proizvod je izrađen od ekološki prihvatljivih materijala!
- Proizvod ne sadrži opasne tvari na bazi kadmija, žive, azbesta, PCB-a (polikloriranih bifenila) ili CFC-a (klorofluorouglijika)!
Sva otpadna ambalaža koja nastaje nakon puštanja proizvoda u rad označava se u skladu s važećim propisima o pakiranju.
- Nakon postavljanja kreveta servisna tvrtka sav ambalažni otpad razvrstava prema grafičkim oznakama i zbrinjava preko ovlaštene tvrtke za gospodarenje otpadom.
- Obratite se prodavaču ili serviseru za mogućnost besplatnog preuzimanja ambalaže preko ovlaštene tvrtke za gospodarenje otpadom.
- Ambalažni otpad koji nastaje tijekom stavljanja proizvoda u rad razvrstati prema grafičkim simbolima i predati ovlaštenoj osobi na daljnje korištenje.
- Sadrži čelične i plastične dijelove koji se mogu reciklirati – za optimalno recikliranje u trenutku zatvaranja proizvoda odvojite pojedinačne dijelove kako bi se sirovine od kojih je proizvod napravljen mogle dalje koristiti (vidi simbole u nastavku).



17. Provjera pravilne instalacije i učestalosti održavanja:

1. Provjerite je li uređaj sastavljen u skladu s uputama navedenim u članku SASTAVLJANJE.
2. Nema kalibrirane parametre.
3. Održavanje se sastoji od redovite provjere fiksacije izvlačne šipke i zatezanja vijčanih rozeta najmanje 1 puta tjedno ili uvijek pri početku korištenja za novog pacijenta.

18. Postproduksijske informacije proizvođaču o uporabi proizvoda u kliničkoj praksi

Obavijestite proizvođača na dolje navedene kontakte o svim korisničkim iskustvima za koja bi trebao biti upoznat.

To su uglavnom

- kvarovi, nedostaci na proizvodu koji su se pojavili tijekom njegove uporabe u vezi s njegovim

- funkcija, svrha uporabe, sigurnost, rizici itd.

- neželjeni događaji, za koje se sumnja da su uzrokovani proizvodom kod pacijenta ili operatera.

Proizvođač će sve provjeriti i po potrebi odgovoriti. Obavještava pacijenta, operatera/korisnika o reakciji.

Osobe koje su doživjele ili sumnjaju na štetni događaj u vezi s korištenjem proizvoda, proizvođač zahtijeva potrebnu suradnju u njegovoj istrazi, odnosno rješenju, pružanje dostatnih i točnih informacija, slikovne dokumentacije (slajdova) itd. postupati s tim pitanjima u skladu sa svojim obvezama prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog izvješćivanja.

Kontakti proizvođača:

Web stranica:

www.marocz.eu

Adresa:

Svolinského 218/1a, 779 00 Olomouc, Češka Republika

Email:

maro@marocz.eu

Telefon, pon-pet ca. 7 do 16 sati

+420 585 355 037

SMS, hitni pozivi:

+420 775 727 656, +420 723 774 035